

## COJINES DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe


**REF.: IM15113 Roll L + Funda Soft Touch**  
**IM15107 Wing + Funda Soft Touch**  
**IM15108 Channel + Funda Soft Touch**

**IM15111 Ring M + Funda Soft Touch**  
**IM16102 Basic S + Funda Higiénica**  
**IM15100 Mini + Funda Soft Touch**

La gama de cojines de posicionamiento LeanOnMe está destinada especialmente a aliviar o compensar desequilibrios funcionales derivados de heridas o discapacidades. Es una herramienta terapéutica óptima para proporcionar apoyo ergonómico, adaptándose a la anatomía del cuerpo, facilitando soporte donde más se necesita y aliviando la presión en distintas partes del cuerpo, y especialmente útiles para personas que pasan largos períodos sentadas o acostadas, ya que están diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de soporte y comodidad.

Son dispositivos desarrollados para proporcionar apoyo y alivio en múltiples posiciones a usuarios que no puedan reposicionarse de forma autónoma, sea por que tengan una condición de movilidad reducida, o por falta de fuerza física suficiente.


Especialmente adecuados para aportar una ayuda valiosa en casos de personas con conductas autolesivas, angustiadas, enfermos de Alzheimer, o que se sientan afectadas por pequeños estímulos de su entorno, por ejemplo, un contacto accidental o no deseado. Envolver al usuario con cojines de posicionamiento estimula el sentido del tacto y puede reducir la ansiedad, la agitación y la ira, beneficiando la cooperación diaria con el cuidador.

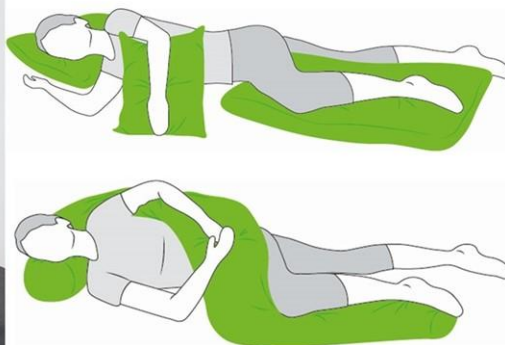

El relleno de los cojines LeanOnMe es una mezcla de material residual y reciclable, una combinación de perlas de polipropileno expandido y espuma viscoelástica granulada proveniente de material residual de la producción de colchones, con un tacto similar a la arena seca, ideal para reposicionar con suavidad, permitiendo moldear al cojín para adaptarse a las necesidades individuales, recuperando su forma original incluso después de muchos usos.

## COJÍN DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe ROLL.

- El cojín de posicionamiento Roll se puede doblar, moldear y ajustar exactamente a las necesidades del usuario.
- Se puede agitar para que se vuelva más voluminoso en algunas áreas y más delgado en otras.
- En la posición lateral, se puede moldear para apoyar la cabeza, la espalda y las piernas.
- Es adecuado para usuarios neurológicos, personas con disminución de la conciencia corporal o con ansiedad, ya que proporciona una buena estimulación táctil.

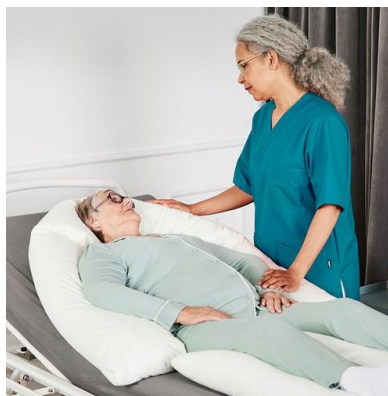

## COJÍN DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe WING.

- El cojín del respaldo Wing se utiliza en posición lateral, y se mantiene en su lugar con el propio peso del usuario, dando estabilidad al usuario.
- El cojín también se puede utilizar para la posición supina para proteger las partes del cuerpo expuestas de la presión de las barandillas de la cama.



## COJÍN DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe CHANNEL.

- Cojín flexible, cosido acanalado, protege, apoya y alivia.
- Se puede enrollar y moldear dependiendo de la aplicación.
- Para aliviar edema, dolor o presión (efecto alivio).



## COJÍN DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe RING.

- El cojín para el cuello se utiliza para proporcionar un apoyo estable y relajante cuando una almohada normal no se considera adecuada.
- Es adecuado para usuarios que padecen la enfermedad de Huntington y otros que desarrollan úlceras por presión occipital. Para usuarios con problemas de control de la cabeza, también se puede utilizar en una cama semisentado o en un sillón para proporcionar un buen reposacabezas.
- El cojín para el cuello se puede llevar fácilmente de viaje para aliviar el dolor de los músculos del cuello y las vértebras.



## COJÍN DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe BASIC.

- Cojines de posicionamiento disponibles en 6 formas y tamaños.
- Indicado en usuarios con necesidades especiales: enfermedad de Alzheimer, parálisis cerebral, hemiplejía, esclerosis múltiple, paraplejía/cuadriplejía, enfermedad de Parkinson, espina bífida y personas con una variedad de trastornos psiquiátricos.
- Se pueden utilizar en posición lateral y supina para apoyar la espalda, los brazos y las piernas, o debajo de las rodillas y tobillos, o en posición supina para facilitar la respiración. También puede usarse para proteger partes del cuerpo expuestas a la presión de las barandillas de la cama.
- Al variar la posición de dos Basic L, los cojines pueden ayudar a la respiración. El método se llama AVT porque las letras simbolizan cómo se colocan los cojines. Esto puede prevenir la neumonía y mejorar la función pulmonar porque las posiciones expanden diferentes partes de los pulmones.



## COJÍN DE POSICIONAMIENTO LeanOnMe MINI.

- Cojín de posicionamiento multiusos.
- Diseñado para ser colocado donde queden espacios entre el cuerpo y el colchón.
- Efecto relajante que se propaga al resto del cuerpo, también para abrir una mano afectada por espasticidad.
- No se hunde ni se aplana.



## CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Los cojines interiores de la gama Immedia LeanOnMe están fabricados teniendo en cuenta nuestra huella ecológica y nuestra capacidad para reducir los residuos, con materiales orgánicos naturales y sostenibles. Superficie única, suave y agradable para la piel al apoyarse, incluso para los usuarios con piel sensible. Su relleno reciclable y bien equilibrado proporciona al paciente una posición de descanso estable, y mejora la capacidad de modelado. Tanto el tejido como el relleno son muy silenciosos, incluso para usuarios con oído sensible.
- Las fundas Soft Touch tienen el Certificado STANDARD 100 por OEKO-TEX®: permiten la circulación de aire óptima, regulación de la temperatura, suaves y flexibles incluso después de muchos lavados, y son silenciosas.



- La funda, suave al tacto, es de tejido elástico acolchado, altamente absorbente, hecha de materiales orgánicos sostenibles y naturales :75% Lyocell (TENCEL + SMARTCEL sensitivo), 25% Modal (100% fibra de celulosa natural de base biológica); y suave al tacto (ideal para pieles sensibles).
  - La funda Higiénica está fabricada de material bielástico, permite la circulación de aire óptima y proporciona aislamiento térmico. Es impermeable y transpirable. Posee una barrera contra ácaros, bacterias y hongos. Tiene efecto “fresh” que reduce los olores.
  - Indicaciones de limpieza/lavado: retirar el cojín interior antes de lavarlo; no planchar; no utilizar suavizante; limpiar con agentes de limpieza con pH de 5-9, sin disolventes, o una solución desinfectante al 70%; lavable hasta 80°C/176 F; puede secarse en secadora a temperatura baja.
  - Existen diferentes tallas en la mayoría de los modelos, así como diferentes combinaciones de fundas (ver tablas del final).
- ✓ LeanOnMe Roll:

Product name	Size	Item no.
LeanOnMe Roll S + Soft-Touch Cover	W330xL1000 mm	IM15112
LeanOnMe Roll L + Soft-Touch Cover	W330xL2300 mm	IM15113
LeanOnMe Roll S + Hygienic Cover	W330xL1000 mm	IM16112
LeanOnMe Roll L + Hygienic Cover	W330xL2300 mm	IM16113
Soft-Touch Cover for IM15112	W330xL1000 mm	IM10512
Soft-Touch Cover for IM15113	W330xL2300 mm	IM10513
Hygienic Cover for IM16112	W330xL1000 mm	IM10612
Hygienic Cover for IM16113	W330xL2300 mm	IM10613

- ✓ LeanOnMe Wing:

Product name	Size	Item no.
LeanOnMe Wing + Soft-Touch Cover	W450xL800 mm + wing 200 mm	IM15107
LeanOnMe Wing + Hygienic Cover	W450xL800 mm + wing 200 mm	IM16107
Soft-Touch Cover for IM15107	W450xL800 mm + wing 200 mm	IM10507
Hygienic Cover for IM16107	W450xL800 mm + wing 200 mm	IM10607

- ✓ LeanOnMe Channel:

Product name	Size	Item no.
LeanOnMe Channel + Soft-Touch Cover	W750xL750 mm	IM15108
LeanOnMe Channel + Hygienic Cover	W750xL750 mm	IM16108
Soft-Touch Cover for IM15108	W750xL750 mm	IM10508
Hygienic Cover for IM16108	W750xL750 mm	IM10608

✓ LeanOnMe Ring:

Product name	Size	Item no.
LeanOnMe Ring S + Soft-Touch Cover	Ø400 mm	IM15110
LeanOnMe Ring M + Soft-Touch Cover	Ø500 mm	IM15111
LeanOnMe Ring S+ Hygienic Cover	Ø400 mm	IM16110
LeanOnMe Ring M + Hygienic Cover	Ø500 mm	IM16111
Soft-Touch Cover for IM15110	Ø400 mm	IM10510
Soft-Touch Cover for IM15111	Ø500 mm	IM10511
Hygienic Cover for IM16110	Ø400 mm	IM10610
Hygienic Cover for IM16111	Ø500 mm	IM10611

✓ LeanOnMe Mini:

Product name	Size	Item no.
LeanOnMe Mini + Soft-Touch Cover	W150xL300 mm	IM15100
LeanOnMe Mini + Hygienic Cover	W150xL300 mm	IM16100
Soft-Touch Cover for IM15100	W150xL300 mm	IM10500
Hygienic Cover for IM16100	W150xL300 mm	IM10600

✓ LeanOnMe Basic:

Product name	Size	Item no.
LeanOnMe Basic XS + Soft-Touch Cover	W300xL400 mm	IM15101
LeanOnMe Basic S + Soft-Touch Cover	W400xL600 mm	IM15102
LeanOnMe Basic M + Soft-Touch Cover	W500xL700 mm	IM15103
LeanOnMe Basic L + Soft-Touch Cover	W250xL800 mm	IM15104
LeanOnMe Basic LW + Soft-Touch Cover	W450xL800 mm	IM15105
LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch Cover	W550xL900 mm	IM15106
LeanOnMe Basic XS + Hygienic Cover	W300xL400 mm	IM16101
LeanOnMe Basic S + Hygienic Cover	W400xL600 mm	IM16102
LeanOnMe Basic M + Hygienic Cover	W500xL700 mm	IM16103
LeanOnMe Basic L + Hygienic Cover	W250xL800 mm	IM16104
LeanOnMe Basic LW + Hygienic Cover	W450xL800 mm	IM16105
LeanOnMe Basic XL + Hygienic Cover	W550xL900 mm	IM16106
Soft-Touch Cover for IM15101	W300xL400 mm	IM10501
Soft-Touch Cover for IM15102	W400xL600 mm	IM10502
Soft-Touch Cover for IM15103	W500xL700 mm	IM10503
Soft-Touch Cover for IM15104	W250xL800 mm	IM10504
Soft-Touch Cover for IM15105	W450xL800 mm	IM10505
Soft-Touch Cover for IM15106	W550xL900 mm	IM10506
Hygienic Cover for IM16101	W300xL400 mm	IM10601
Hygienic Cover for IM16102	W400xL600 mm	IM10602
Hygienic Cover for IM16103	W500xL700 mm	IM10603
Hygienic Cover for IM16104	W250xL800 mm	IM10604
Hygienic Cover for IM16105	W450xL800 mm	IM10605
Hygienic Cover for IM16106	W550xL900 mm	IM10606